




AXI

Wherever you want 2 go



Quality and style

Axi transport chair

Are you looking to provide your mobility-impaired visitors with a comfortable, user-friendly chair? Then Axi is the answer! A vandalism and theft-proof transport chair that is just right for your public areas thanks to a unique nesting system. With their contemporary design, these striking Axi transport chairs will boost your image as a modern, service-oriented organisation.

Axi transportstoel

Wilt u uw bezoekers die slecht ter been zijn een comfortabele en gebruiksvriendelijke rolstoel bieden? Dan is de Axi dé uitkomst! Een vandalisme- en diefstalbestendige transportstoel die perfect past in uw openbare ruimtes dankzij een uniek zelfordenend systeem. Met deze opvallende en eigentijds vormgegeven Axi transportstoelen kunt u een bijdrage leveren aan uw uitstraling als moderne en servicegerichte organisatie.

AXI_{2GO}





Great space-saver



Unique nesting system*

Transport chairs that are used to take visitors from the car park to the building entrance, for example, can often cause inconvenience. People leave them everywhere except where they belong. To tackle this problem, Axi transport chairs can be stored in an Axi park that can be easily identified by everyone. The chairs can be nested neatly inside each other. The nesting system prevents chaos in your public spaces.

* Patented

Axi park

The Axi park is easy for everyone to identify.



Uniek zelfordenend systeem*

Transportstoelen die worden gebruikt om bijvoorbeeld van de parkeerplaats naar de ingang van een gebouw te komen, zorgen vaak voor overlast. Dit omdat ze overal worden achtergelaten, behalve op de plek waar ze horen. Om dit probleem aan te pakken, kunnen de Axi transportstoelen in een voor iedereen goed herkenbare Axi standplaats worden geplaatst. De stoelen kunnen hier compact in elkaar worden geschoven. Op die manier voorkomt het zelfordenend systeem dat het een chaos wordt in uw openbare ruimtes.

* Gepatenteerd

Axi standplaats

De Axi standplaats is voor iedereen goed herkenbaar.





Varied colour range



What colour fits in with your organisation?

The Axi is available in all RAL colours, so you can choose a colour that matches your own house style. Boost your image with the Axi and brighten up your reception area.

The coating

The highly corrosion resistant cathodic coating makes the Axi and all its fastening materials weatherproof.

Welke kleur past bij uw organisatie?

Doordat de Axi in alle RAL kleuren leverbaar is, kan de kleur afgestemd worden op uw eigen huisstijl. Versterk uw uitstraling met de Axi en fleur uw ontvangthal op.

De coating

De hoge corrosiebeschermende cataforese lak zorgt ervoor dat de Axi, net als al het bevestigingsmateriaal, weerbestendig is.

Easy to use

Axi in 6 steps

1. If necessary, insert a coin in the coin slot and release the Axi.
2. If present, use the luggage carrier so you can keep your hands free.
3. Start the Axi by pressing the black brake lever downwards.
4. The occupant can now sit down. Before you start, the feed should be on the footrest.
5. Tackle any obstacles using the tilt pedal.
6. After use, return the Axi to the Axi park and retrieve your coin.

Axi in 6 stappen

1. Plaats, indien nodig, een muntstuk in het muntslot en ontkoppel de Axi.
2. Maak, indien aanwezig, gebruik van het bagagerekje. Zo houdt u uw handen vrij.
3. U kunt met de Axi gaan rijden door de zwarte rembeugel naar beneden te duwen.
4. De inzittende kan plaatsnemen. Zet alvorens u gaat rijden de voeten op de voetplaat.
5. Eventuele obstakels zijn te trotseren met de kiepvoorziening.
6. Stal de Axi na gebruik en ontvang uw muntstuk terug.





Safe to use

Everything under control

The brake lever engages the Axi brake. As the accompanying person, you therefore have full control over the transport chair. But besides control, stability is also an important factor. Because the wheels are optimally balanced, inexperienced users can use the Axi both indoors and outdoors with no problems at all. The chair is also easy and safe for the occupant to get in and out of.

NB: For safety reasons, Life & Mobility recommends using a seat belt when using the chair outdoors.

Alles onder controle

De rembeugel zorgt ervoor dat de Axi automatisch op de rem staat. Als begeleider houdt u hierdoor dus altijd controle over de transportstoel. Naast controle speelt ook stabiliteit een belangrijke rol. Door de optimale wielbalans kunnen onervaren gebruikers de Axi met een gerust hart gebruiken, zowel binnen als buiten. Ook in- en uitstappen gaat makkelijk en veilig.

Let op: In verband met de veiligheid adviseert Life & Mobility buiten een gordel te gebruiken.

AXI_{2GO}





Comfort seating

Focus on the end user

The user of a transport chair wants to sit comfortably even if they are only using it for a short time. That is why the Axi is fitted with a preformed seat, backrest and armrests. This combination delivers surprisingly good sitting comfort. For even greater comfort, we also offer optional 3D-woven seat and backrest covers.

De eindgebruiker staat centraal

De gebruiker van een transportstoel wil prettig zitten, ook al is het vaak maar voor korte tijd. Vandaar dat de Axi is voorzien van een voorgevormde zitting, rugleuning en armsteunen. Samen zorgen deze voor een verrassend goed zitcomfort. Voor extra zitcomfort kunt u de 3D geweven zit- en rughoezen aanschaffen.

AXI_{2GO}





Built to last

AXI_{2GO}

Durable and vandalism-proof

These days, transport chairs not only have to be durable and low maintenance, but - sadly - they also need to be vandalism-proof. So the frame, seat and backrest of the Axi are made entirely of high-grade steel with a minimum number of moving parts. The Axi is fitted with maintenance-free, anti-leak tires, so the chair is always light to manoeuvre and easy to steer. Thanks to the protective powder coating, the Axi can be used both indoors and outdoors.

Hard to steal

The optional coin slot and/or anti-theft post significantly reduce the risk of theft. Tip: You can decorate both the Axi itself and the anti-theft post with a printed design of your own choice.


Duurzaam en vandalismebestendig

Transportstoelen moeten tegenwoordig niet alleen duurzaam en onderhoudsarm zijn, maar helaas ook nog eens vandalismebestendig. Daarom zijn het frame, de zitting en de rugleuning van de Axi geheel gefabriceerd van hoogwaardig staal, met een minimum aan bewegende delen. De Axi is voorzien van onderhoudsvrije antilek banden, waardoor de stoel altijd licht rijdt en gemakkelijk bestuurbaar is. Dankzij de beschermende poedercoating kan de Axi zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Moelijk te stelen

Door middel van het muntslot en/of een antidiefstalpaal is de kans op diefstal aanzienlijk te verkleinen. Tip: Niet alleen de Axi, maar ook de antidiefstalpaal kunt u verfraaien met een opdruk naar eigen ontwerp.



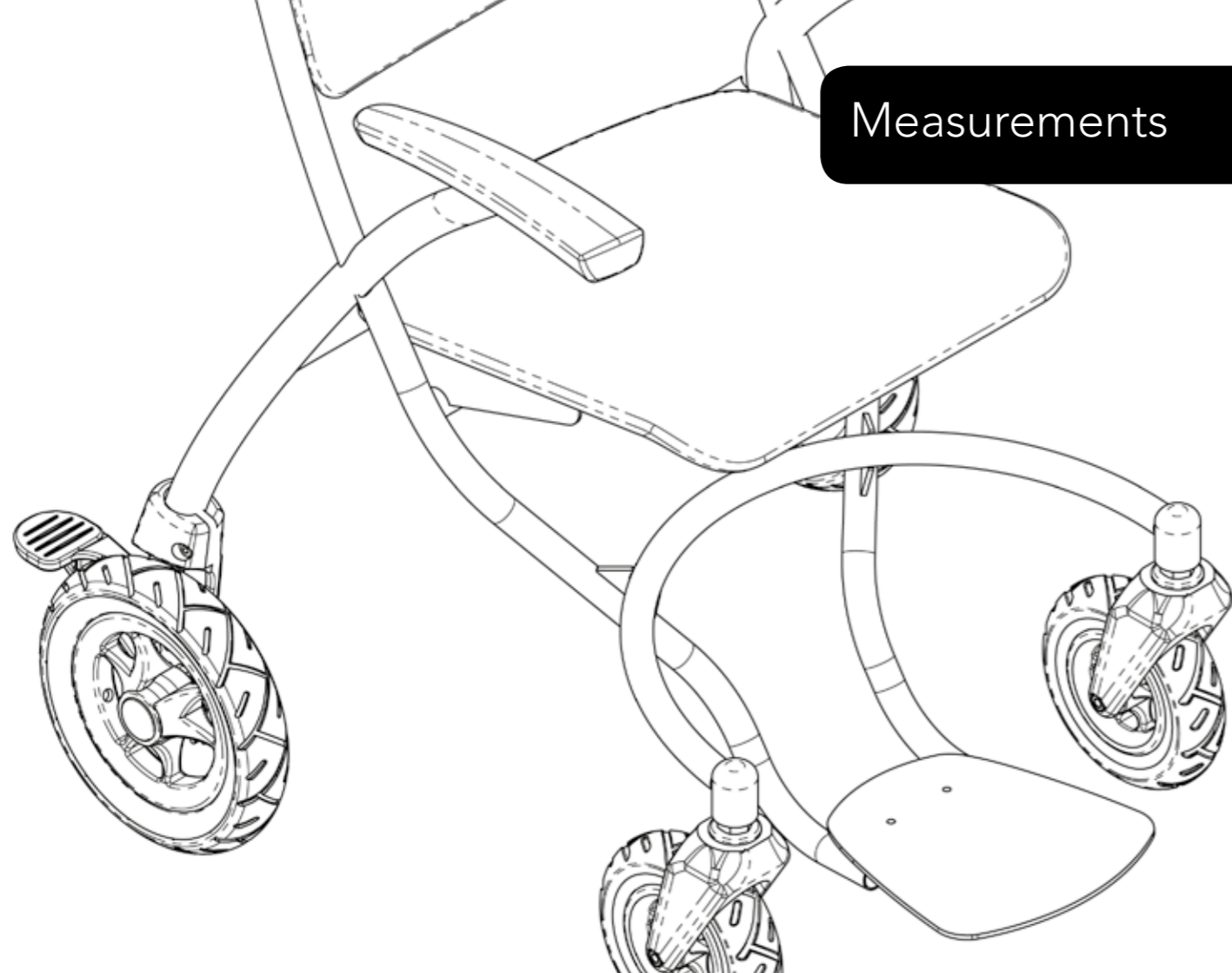

Measurements

Specifications

Specificaties

AXI_{2GO}

Width	Breedte rolstoel	73,5 cm
Length	Lengte rolstoel	90 cm
Extra length per nestable chair	Extra lengte per nestbare stoel	+ 28 cm
Seat width	Zitbreedte	45 cm
Seat height	Zithoogte	50 cm
Seat depth	Zitdiepte	45 cm
Seat angle	Zithoek	9°
Backrest height	Rughoogte	48 cm
Armrest height	Armleggerhoogte	25 cm
Lower leg length	Onderbeenlengte	45 cm
Height of push- + brake-handle	Hoogte duw- + rembeugel	98 cm
Total weight	Totale massa	26 kg
Maximum user weight	Maximaal gewicht inzittende	125 kg
Maximum load luggage rack	Maximale lading bagagerekje	15 kg



Accessories



Coin lock / master coin
Muntslot / dummy munt



Luggage rack
Bagagerekje



Seat cover
Zithoes



Backrest cover
Rughoes



Axi Park
Axi standplaats



Catheter hook
Catheterhaak



Seat belt
Zithoudingsgordel



Anti-theft post
Antidiefstalpaal



Anti-theft post with 2 infusion hooks
Antidiefstalpaal voorzien van 2 infuushaken



Anti-theft post with fixing tube
Antidiefstalpaal voorzien van bevestigingsbuis



Logo plate
Logoplaat



Wall plate with starting chain
Muurplaat met begincketting



www.axi2go.com

Logistiekweg 7, 7007 CJ Doetinchem P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem
T +31 (0)314 - 328 000 F +31 (0)314 - 328 001 E info@life-mobility.com | www.life-mobility.com

**Life & Mobility**
INSPIRED BY LIFE