



- Aluminium eller Carbon ramme
- Vægt uden hjul KUN fra 4,2 kg!
- Justerbar stropsæde
- Vinkeljusterbar stroppryg, nedfældelig
- Justerbar sædehøjde
- Justerbart balancepunkt



### **APEX redefinerer forventningerne til fastrammestolen**

Vores nyeste ultralette og fuldt justerbare fastrammekørestol repræsenterer en mindre revolution i design. Hvorfor? Fordi det bedste fra forskellige koncepter er blevet forenet i APEX. Det bedste af i form af ultra lav vægt, høj styrke og ydeevne som man normalt forbinder med kulfiber og for første gang, det bedste fra fuldt justerbare aluminiums kørestole—en egen-skab der ikke før er set på stole bygget i kulfiber.

Apex er en af markedets mest alsidige fastrammestole. Med valg imellem en ramme i Kulfiber (Carbon) eller aluminiums, 4 forskellige rammevinkler samt sædebredde og sædedybde startende fra 30 cm. og helt op til 51 cm. kan stolen tilpasses de fleste brugere.

### **Stabil og høj styrke.....og ultra fleksibel**

De fleste fastrammestole som vi kender i dag er kendetegnet ved høj styrke og god stabilitet men også stærkt begrænset i forhold til at kunne foretage løbende indstillinger. Med APEX's nye rammekonstruktion får du både stabilitet, styrke, lav vægt og fleksibilitet— velegnet til den nye bruger eller til situationer hvor dagligdagen byder på nye udfordringer der kræver ændringer på din kørestol. I APEX kan du således justere sædebunden, ryghøjden, rygvinklen, bagerste sædehøjde, forreste sædehøjde, stolens balancepunkt, hjulaksel bredde, samt evt. antitippers højde. Med andre ord—APEX er Ultra fleksibel!

# MEYRA®

# APEX



## Justerbar rygvinkel

med mange indstillinger så ryggen kan tilpasses i alle positioner



## Bagaksel

trinløs justerbar og med laserskåret målebånd for nøjagtig placering



## Patenteret klembeslag

muliggør avanceret ramme opbygning



## Integreret stødpolstring

med gummibelægning. Sikrer bedre greb ved forflytninger



## Forkofanger

sikrer rammen imod stød og giver stil og personlighed til stolen



## Indbygget vaterpas

sikrer korrekt og hurtig indstilling af både bagakse og forgaffel



# MEYRA®



### APEX Carbon

Det ypperste i design og funktion—valgt af de mest kritiske brugere verden over.

#### Tekniske specifikationer:







Rammetype: Single tube open frame  
Materiale: T-700 High-Modulus Carbon Fiber  
Vægt: 4,2 kg. (uden hjul) 41x41 cm. stol  
Brugervægt: 113 kg.

### APEX Aluminium

Et stærkt alternativ til carbon—den anvendte aluminium er 20% stærkere end T7005 aluminium og løfter APEX ind i en ny liga.

#### Tekniske specifikationer:

Rammetype: Single tube open frame  
Materiale: Tripple-Butted aluminium  
Vægt: 4,8 kg. (uden hjul) 41x41 cm. stol  
Brugervægt: 113 kg.

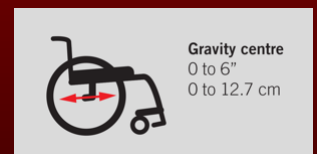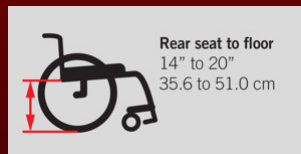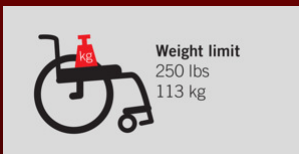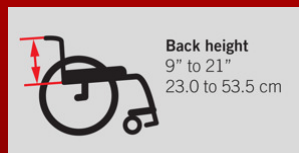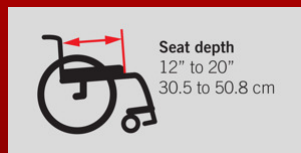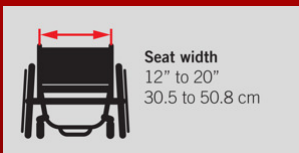

# MEYRA®