

MINY®  
MINY®

## Understel med sædevip Underframe with tilting mechanism



Passiv siddestilling  
Passive seating



**interco**  
Seat up your Life!

## Lille, let, sød Mini, light, cuddly

MINY® er det mindste understel på markedet, som kan anvendes i kombination med standardiserede eller specialfremstillede sædesystemer, men det kan også fungere som kørestol i kombination med en anatomisk udformet sæde-rygenhed. Den let abducerede ramme muliggør en optimeret siddeposition. Ryglænet er let at klappe sammen, og stellet passer også ind i små biler.

- ▶ Standardiserede og individuelt fremstillede skalsystemer kan vha. en trapezformet adapter monteres på den tilsvarende holder. Monteringsanordningen har fire indstillingsmuligheder.
- ▶ En fastmonteret anatomisk sæde-rygenhed i kombination med MINY® med 20"-, 22"- eller 24"-hjul er en perfekt letkørende aktiv kørestol.
- ▶ Uanset hvilket anvendelsesområde MINY® er beregnet til, er det altid muligt at hælde hele enheden ca. 35° via en gasfjeder.
- ▶ Det nye og enestående tipsikringssystem omfatter tipsikring og vippehjælp, sammenført til en enhed. Tipsikringssystemet kan bekvemt skydes ind under kørestolen.
- ▶ Sædehøjde og sædedybde kan justeres, således at der opnås en optimal indstilling, tilpasset efter den enkeltes behov.
- ▶ Rygenhedens vinkel er let at justere.



MINY med MAGICLIGHT i vippeposition  
MINY with MAGICLIGHT in tilted position

MINY® is the smallest commercially available undercarriage. It can be combined with standardised or tailored seating systems or with an anatomically moulded seat back unit, to function as an active wheelchair. The frame can be easily abducted and permits an optimal sitting position. The back rest can be easily folded, so that the frame can be fitted into even small cars, such as a MINY®.

- ▶ Standardised and individually prepared seats can be adapted to the desired fit with a trapezoidal adaptor. The adapter holder has four settings.
- ▶ A fixed anatomical seat back unit in combination with MINY® with 20", 22" or 24" wheels gives a perfect light active wheelchair.
- ▶ The whole unit can be tipped at any time by about 35° with a gas pressure spring, whether MINY® is being used or not.
- ▶ The unique new tilt stop system includes protection from tipping and a tipping aid. The tip stop system can be comfortably inserted under the wheelchair.
- ▶ Seat height and seat depth are adjustable, according to the needs it is possible to find the right position.
- ▶ The back unit is easily to adjust in angle.

## Standardudstyr

### Basic configuration

---



Abduceret ramme / Fodpladesystem  
Abductor frame / Footrest system

- ▶ Aluminium-grundramme i let abduceret udførelse
- ▶ Sædevip vha. en gasfjeder op til ca. 35°
- ▶ Trapezformet påsætningsanordning til interco-sædeenheder med trapezformet adapter
- ▶ Alternativ monteringsenhed til anatomisk sæde- og ryggenhed
- ▶ Letkørende hjul i størrelserne 20", 22" eller 24" med drivringe af aluminium
- ▶ Drivhjul i størrelserne 12", 16"
- ▶ Luftfyldte eller massive dæk
- ▶ Standard-styrehjul i forskellige størrelser
- ▶ Individuelt farvevalg fra hele RAL-sortimentet
- ▶ Sædehøjde og sædedybde justerbar
- ▶ Ryglæn, dybde- og vinkeljusterbar



Enkelte skubbehåndtag (valgfri)  
Single pushing bars (optional)

- ▶ Aluminium base frame with an easily abducted design
- ▶ Seat tilt with gas pressure spring by about 35°
- ▶ Trapezoidal adapter receptive for interco seat shells with trapezoidal adapter
- ▶ Option of holder unit for anatomical seat back unit
- ▶ Smooth rolling wheels in 20", 22" or 24" with aluminium safety rings
- ▶ Drive wheels in 12", 16" as well as 20", 22" and 24"
- ▶ Pneumatic tyres or puncture proof tyres
- ▶ Standard driving wheels of various sizes
- ▶ Individual colour range from the whole RAL range
- ▶ Seat height and seat depth adjustable
- ▶ Backrest adjustable in depth and angle


## Ekstra tilvalgsmuligheder

### Additional options

---



Tipsikring/vippehjælp  
Tip stop/ tipping aid

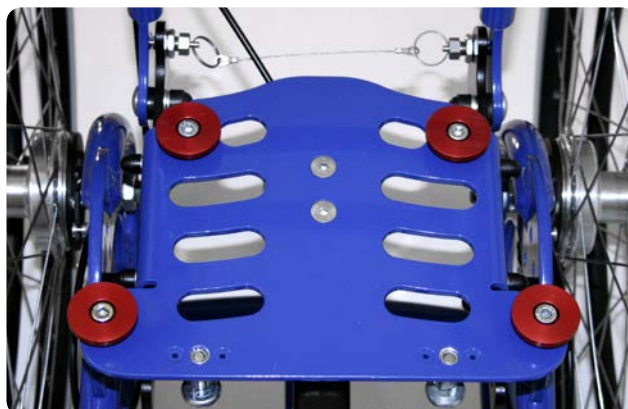

Trapezformet adapter/mekanisme til sammenklapning  
Trapezoidal adapter/Folding mechanism

- ▶ Anatomisk sæde-rygenhed
- ▶ Individuel ERGOLINE® sæde-enhed af karbon eller aluminium
- ▶ Fodpladesystem med højde- og vinkeljusterbar fodplade
- ▶ Fodplade, kan klappes bagud, med skridsikker belægning
- ▶ Tromlebremsehjul med håndbremse
- ▶ Hovedstøttesystemer
- ▶ Ekstra overtræk til drivringe
- ▶ Forskellige egebeskyttere
- ▶ Knæledsbremse
- ▶ Integrerede sidestykker med tøjbeskytter
- ▶ To skubbehåndtag, højdejusterbar
- ▶ Alternative profilhjul med integreret drivring
- ▶ Skubbehåndtag enkelt
- ▶ Yderligere valgmuligheder er under udarbejdelse

- ▶ Anatomical seat back unit
  - ▶ Individual ERGOLINE® seat unit made of carbon or aluminium
  - ▶ Foot bank system with height- and angle-adjustable foot plate
  - ▶ Foot plate can be folded up and backwards, with non-slip coating
  - ▶ Drum brake wheels with special parking brakes for escort
  - ▶ Head support systems
  - ▶ Special push-rim covers
  - ▶ Various spoke protectors
  - ▶ Toggle lever break system
  - ▶ Integrated side parts to protect clothes
  - ▶ Split push handle, with adjustable height
  - ▶ As an option, profile wheels with integrated handle
  - ▶ Single pushing bars
  - ▶ Further options in preparation
-

## Tekniske specifikationer

### Technical Data

	MINY SB 30	MINY SB 35	MINY SB 40
Vægt inkl. hjul i standardudførelsen (uden armlæn, hovedstøtte, fodplade)	ca. 16,5 kg	ca. 17,0 kg	ca. 17,5 kg
Sædebredde	30 cm	35 cm	40 cm
Sædedybde adapter min. - maks.	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm
Totalbrede (+ camper)	50 cm (+ 5 cm)	55 cm (+ 5 cm)	60 cm (+ 5 cm)
Længde maks. uden skubbehåndtag (24" hjul)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)
Højde til overkanten af adapterpladen min. - maks.	46-48 cm	46-48 cm	46-48 cm
Højde skubbehåndtag min. - maks.	ca. 98-110 cm	ca. 98-110 cm	ca. 98-110 cm
Maks. belastning	60 kg	60 kg	60 kg
Camber	6°	6°	6°

	MINY SB 30	MINY SB 35	MINY SB 40
Weight including wheels in basic configuration (without leg rest)	approx. 16,5 kg	approx. 17,0 kg	approx. 17,5 kg
Seat width	30 cm	35 cm	40 cm
Seat depth adapter min. - max.	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm
Over all width (+ camber)	50 cm (+ 5 cm)	55 cm (+ 5 cm)	60 cm (+ 5 cm)
Max. Length without pushbar (with 24" wheels)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)
Height to upper edge adapterplate min. - max.	46-48 cm	46-48 cm	46-48 cm
Height pushing bar min. - max.	approx. 98-110 cm	approx. 98-110 cm	approx. 98-110 cm
Max. load	60 kg	60 kg	60 kg
Wheel camber	6°	6°	6°

#### Gennemprøvet sikkerhed - transport i bil

Produktkombinationen, bestående af et understel fra MINY® med sædesystemer fra enten MAGICLIGHT®, MAGICLINE® eller ORTHOLIGHT® og samtidig udstyret med en anordning til fastgørelse af kørestole i motorkøretøjer, er blevet testet og godkendt jævnfør ISO 7176-19 og ISO 10542-2. Denne produktkombination i forbindelse med en anordning til fastgørelse af kørestole i motorkøretøjer er egnet til transport af brugere i køretøjer under den forudsætning, at bilen er udstyret med en tilsvarende fastspændingsanordning.

#### Certified safety

The product combination undercarriage MINY® with seating systems MAGICLIGHT®, MAGICLINE® or ORTHOLIGHT® with a wheelchair restraint system Protector is successfully tested according to ISO 7176-19 and ISO 10542-2. This product combination in combination with a restraint system is suitable for patient transport in a motor vehicle, when the vehicle is equipped with an appropriate device for fastening.



Gesellschaft für Planung und Vertrieb  
von Rehabilitationshilfen mbH

Im Auel 50  
53783 Eitorf  
Germany

T. +49 2243 8807-0  
F. +49 2243 8807-29  
E. info@interco-reha.de  
I. www.interco-reha.de

Denne brochure er blevet udleveret af / This brochure is presented by:

**MEYRA®**  
We move people.

Meyra Ortopedia Danmark K/S  
Støberivej 1  
3660 Stenløse  
Tlf. 47 10 77 55  
Fax. 47 10 77 53

Din kompetente partner i din nærhed / Your competent local partner

© interco GmbH, Eitorf, 2014  
Version august 2014  
Ret til tekniske ændringer forbeholdes

Status as per August 2014  
Subject to technical alterations  
without prior notification

Certificeret ifølge  
Certified as per  
**DIN EN ISO 9001:2008**  
Reg.-nr. 73 100 357-1  
**DIN EN ISO 13485:2007**  
Reg.-nr. 70 105 357-1  
TÜV Hessen

