

MEYRA®

MYSEAT

DET MODULÆRE

SIDDESYSTEM




PHYSIPRO
BY MEYRA

» ET TILPASSET SIDDESISTEM ER NØGLEN TIL EN GOD POSITIONERING«

mySeat // SÆDE- OG RYGSYSTEM

- Forbinder god siddestabilitet med en høj grad af individualisering, ved hjælp af optionalt positioneringstilbehør
- MySeat sæde- og ryggenhed kan hurtigt og nemt fastgøres på hhv. sædebund og rygskal ved hjælp af velcro
- Påviselig trykafledning forhindrer dannelse af siddesår
- Hurtig afledning af varme og væske, takket være den åbne poreplast og det åndbare betræk
- Sædebredde 43 og 48 cm
- Sædedybde 40, 43, 46 og 49 cm
- Der kan leveres inkontinensovertræk til sædepuden

ANTI-DECUBITUS SÆDEPUDE




OPTIMAL TRYKFORDELING // FLEKSIBELT OG FOREBYGGENDE

Flerlags-opbygningen medfører en fordelagtig kombination af de forskellige materialers egenskaber. Det gør puden til et effektivt hjælpemiddel til profylakse og behandling af decubitus.

Memory skum i det øverste lag tilpasser sig kropsformen. Den åbne cellestruktur fordeler trykket jævnt over hele sædefladeren og giver dermed høj komfort.

Anatomisk formede kiler aflaster de særligt decubitus-udsatte siddeknuder og halebenet.


Urethan komfortskum udmærker sig ved stor elasticitet, behagelig siddekomfort og høj luftcirkulation.

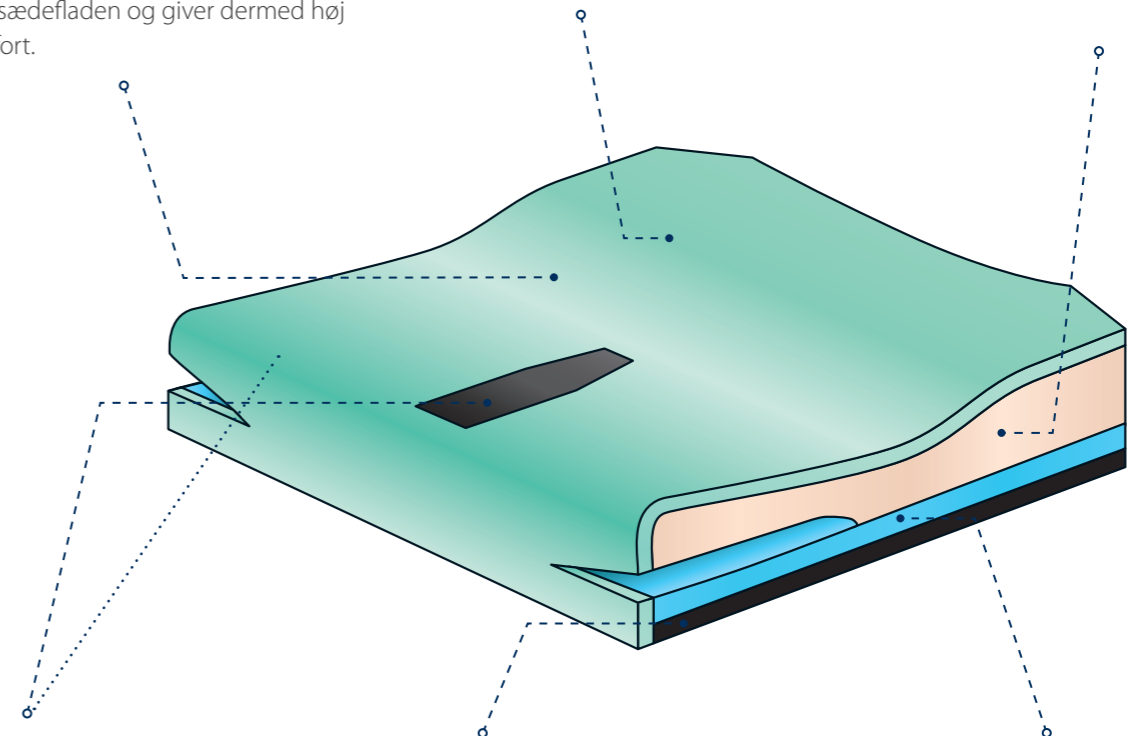

Positioneringstilbehør kan fastgøres med burrebånd på pudens over- og underside, alt efter de individuelle behov.

Fast og stabil skum på undersiden øger bundens stivhed og forlænger dermed pudens levetid.

Fleksibelt og åbencellet PU-skum tilpasser sig til den individuelle kropsform og vægt, absorberer belastninger og reducerer dermed belastningstrykket.

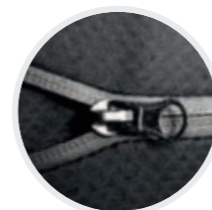

Med lynlåsen kan pudens betræk tilpasses variabelt til alt positioneringstilbehør.

» INDIVIDUEL TILPASNING MED FORSKELLIGE MODULÆRE ELEMENTER«




// ALLE MENNESKER SIDDER FORSKELLIGT

Sæde- og rygpolstringerne kan suppleres med et bredt sortiment af positioneringstilbehør alt efter de individuelle behov. Dermed bliver det muligt at korrigere, stabilisere og understøtte kropsholdningen.

Adduktionskile reducerer lårenes adduktion og forbedrer derved den ellers ufordelagtige hoftesituation. Leveres i tre tykkelser.

Lårstyr modvirker, at lårene falder udad (abduktion). Derved forbedres siddestabiliteten, og den negative indvirkning, som abduktion og ydre rotation har på hofte- og knæled, reduceres.

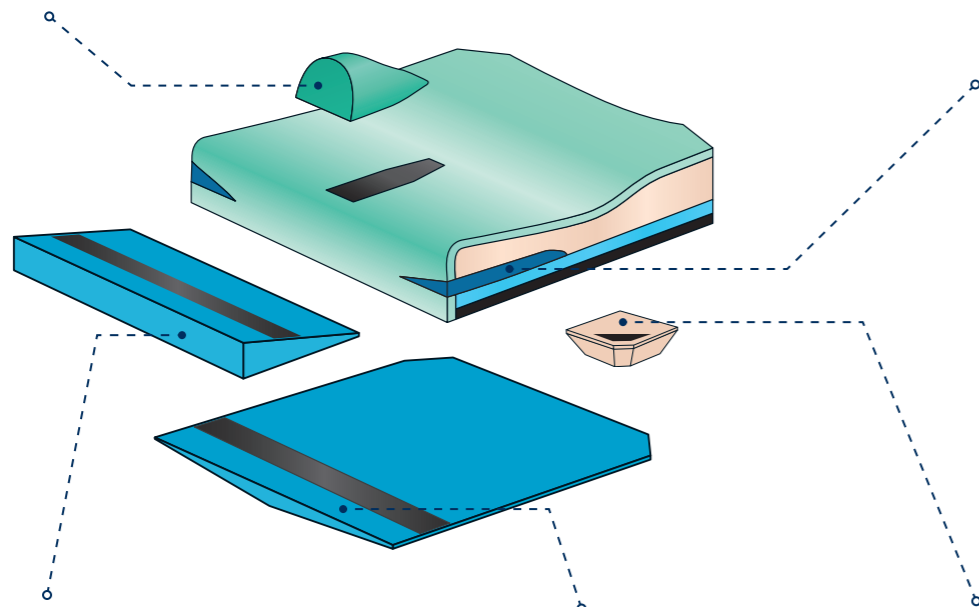

Skråkilen understøtter bækkenstabiliteten og reducerer hældningen fremad. Leveres i tre tykkelser.

Bundpladen modvirker at kørestolens sæde hænger så der skabes en plan flade og genopretter dermed bækkenbalancen.

Hemi-udligningskilen udligner tabet af sædemuskel-tonus ved en halvsidig lammelse og øger dermed belastningsfladen. Leveres i tre tykkelser.

// OPTIMAL TILPASNING

Den åndbare **overtrækspude** er som standard en del af rygpudden. Den giver ekstra siddekomfort. Overtrækspudens læg gør det muligt at anvende den sammen med forskelligt positioneringstilbehør.




Thorakalkilen udfylder det hulrum, der opstår som følge af en kyfose, og forøger ryggens belastningsflade.

Lumbalkilen kompenserer en bagudhældning af hoften, så det opståede hulrum bliver udfyldt, og belastningsfladen forøget. Trykket bliver dermed bedre fordelt.

Kroppens sideværts bevægelser kontrolleres med **thoraxpelletterne**, og kropsholdningen stabiliseres. Med denne understøttelse bliver trykket fordelt over en større flade.

Lordosepudden udligner en lordose. Bækkenets naturlige fremadhældning bevares.

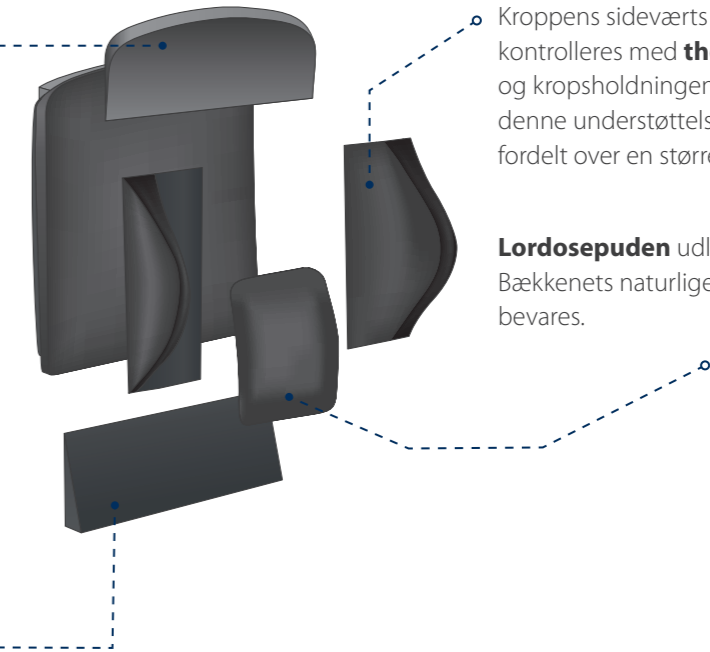

Positioneringstilbehøret kan fastgøres på forskellige sædesystemer helt uafhængigt af basispudden.

// mySeat komfortsæde

VARE NR.	KODE	BETEGNELSE (SB = SÆDEBREDDE, SD = SÆDEDYBDE)
90350	43/2007/788	Sædepude, sort betræk SB 43/SD43 åndbar *
90350-1	43/2007/619	Sædepude, sort betræk, SB 43/SD 46 åndbar *
90350-2	43/2007/792	Sædepude, sort betræk, SB 43/SD 49 åndbar *
90350-3	48/2007/615	Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 40 åndbar *
90350-4	48/2007/788	Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 43 åndbar *
90350-5	48/2007/619	Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 46 åndbar *
90350-6	48/2007/792	Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 49 åndbar *
90351	43/2008	Inkontinensbetræk til pude, SB 43
90351-1	48/2008	Inkontinensbetræk til pude, SB 48

* inklusive inkontinensovertræk til hynder

// mySeat komfortsæde - positioneringstilbehør

BESTILLINGS- NR.	KODE	BETEGNELSE
90355	2009	Bundplade
90352	43/2010	Skråkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm
90352-4	48/2010	Skråkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm
90352-1	43/2011	Skråkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm
90352-5	48/2011	Skråkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm
90352-2	43/2012	Skråkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm
90352-6	48/2012	Skråkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm
90353	2013	Hemi-udligningskile, lille, tykkelse 2,5 cm
90353-1	2014	Hemi-udligningskile, mellem, tykkelse 3,75 cm
90353-2	2015	Hemi-udligningskile, stor, tykkelse 5 cm
90354	2016	Adduktionskile, lille, tykkelse 2,5 cm
90354-1	2017	Adduktionskile, mellem, tykkelse 3,75 cm
90354-2	2018	Adduktionskile, stor, tykkelse 5 cm
90356	964	Lårstyr, par


// mySeat komfortryg



BESTILLINGS- NR.	KODE	BETEGNELSE
9030090301	43/2019/2020	Komfortryg inkl. overtrækspude, sort betræk, SB 43
90302 90303	48/2019/2020	Komfortryg inkl. overtrækspude, sort betræk, SB 48

// mySeat komfortryg - positioneringstilbehør

BESTILLINGS- NR.	KODE	BETEGNELSE
90320	2021	Thoraxpelletter, store, stk.
Nyhed		
90320-small	2032	Thoraxpelletter, små, stk.
90321	2022	Lordosepude, lille, tykkelse 2,5 cm
90322	2023	Lordosepude, mellem, tykkelse 3,75 cm
90323	2024	Lordosepude, stor, tykkelse 5 cm
90324	43/2025	Thorakalkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm
90326	43/2026	Thorakalkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm
90328	43/2027	Thorakalkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm
90325	48/2025	Thorakalkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm
90327	48/2026	Thorakalkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm
90329	48/2027	Thorakalkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm
90330	43/2028	Lumbalkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm
90332	43/2029	Lumbalkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm
90334	43/2030	Lumbalkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm
90331	48/2028	Lumbalkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm
90333	48/2029	Lumbalkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm
90335	48/2030	Lumbalkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm

MEYRA

 Støberivej 1
3660 Stenløse

 Tlf. 47 10 77 55
 Fax. 47 10 77 53

 salg@meyra.dk

www.meyra.dk
