


# NxT BioFit

- Trykaflastende
- Positionering
- Kølende
- Antibakteriel



NxT BioFit er en anatomisk formet multi-lags pude hvor man udnytter den seneste teknologi inden for Visco Gel skum. Toppen af puden er belagt med Visco elastiske gelperler der er med til at reducere varmeudviklingen i puden. Multilags designet giver en fordybning i puden som således støtter og beskytter huden ved at omfordele tryk over hele overfladen af puden. Pudens bund er desuden perforeret strategiske steder så brugeren synker nøjagtig ned i puden for dermed at opnå optimal støtte. BioFit er designet til at yde komfort og positionering for brugere med moderat til høj risiko for dannelse af tryksår.

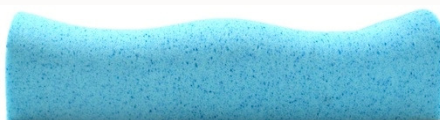

## Data:

Sædebredde: 25—53 cm.

Sædedybde: 25—50 cm.

Højde: 8,2 –9,2cm.

Brugervægt: 150 kg.

Egenvægt: 1100 gram

## HMI nr.:

87487—87507

### Top lag

Blå Visco Gel skum som reducerer varmeudvikling. Giver desuden en blød overflade og forbedre muligheden for at puden tilpasser sig brugeren. Skumgelen er fremstillet så det opnår antibakterielle egenskaber.

### Mellem lag

Halv hård Visco skum som giver øget støtte, positionering og dybde i puden

### Nederste lag

HR skum som giver en fast og stabil base samt øget holdbarhed

- Indbygget hoftestøtte så skade minimeres og bækkenet understøttes
- Moderat bendeler til øget styr og positionering af lårben
- Afrundet bagtil for at aflaste rygsøjle og for at kunne matche ryglænet form
- Skrå forkant så puden ikke lukker af for blodomløb
- SPS (Selectively Perforated Softening) til at støtte ischial /sakrale området